

Použití zubních kartáčků IONICKISS je bezpečné pro všechny.
Nicméně, pokud používáte kardiotimulátor či podobné zařízení, prosíme, konzultujte použití kartáčku se svým lékařem.



Klinicky prokázáno - IONICKISS odstraňuje zubní plak až o 48% efektivněji než ostatní zubní kartáčky



Výmenná hlavice - pro dosažení co nejlepších výsledků měňte výmennou hlavici každě dva až tři měsíce.



3V baterie - lithiová baterie zabudovaná do těla kartáčku vydrží cca jeden rok.



Vyrobeno v Japonsku - synonymum pro kvalitu a inovace. Kartáček IONICKISS KIDS je oficiálně certifikován u Tokijského technologického institutu.



Ionizační technologie - negativně nabité ionty narušují vazbu mezi zuby a zubním plakem.



Není potřeba žádná zubní pasta - první zubní kartáček, který lze úspěšně používat i bez zubní pasty.

Části zubního kartáčku

1 Výmenná hlavice

2 Kovová tyčinka sloužící k přenosu iontů

3 Indikátor stavu baterie

4 Tlačítko pro kontrolu stavu baterie

5 Hermeticky zabudovaná 3V baterie

6 Vodivý pásek z termoplastického kompozitu

IONICKISS™
アイオニック



NÁZEV:
Manuální ionizační zubní kartáček IONICKISS KIDS.

POPIŠ:

Manuální ionizační kartáček se zabudovanou baterií a jednou výměnnou hlavicí.

DATUM EXPIRACE:

neomezené

UPOZORNĚNÍ:

Uchovávejte mimo dosah dětí mladších tří let.

VÝROBCE:

IONIC CORPORATION
914-1 Nazukari, Nagareyama,
Chiba, 270-0145 Japan


DISTRIBUTOR:

Ortus Health s.r.o.,
IČ 08754039, Česká republika



**Ionic
technology**

Jak to funguje?

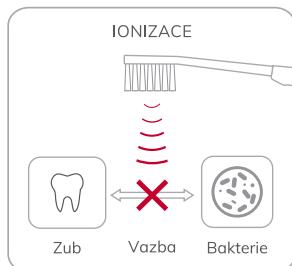

Jak IONICKISS odstraňuje zubní plak?

Zubní plak je přichycen k zubům za pomocí pozitivních iontů ze slin. Negativní ionty ze zubního kartáčku IONICKISS účinně rozrušují tuto vazbu mezi zubem a plakem a umožňují tak snadné odstranění plaku pohybem kartáčku.



Ionizační technologie

48%

Efektivněji




Vyrobeno v Japonsku

Jak se používá?

Kartáček IONICKISS se používá velice jednoduše.

Při držení kartáčku se dotýkejte navlhčeným prstem nebo dlaní černého kompozitu na zadní straně kartáčku a vyčistěte si zuby jak jste zvyklí.

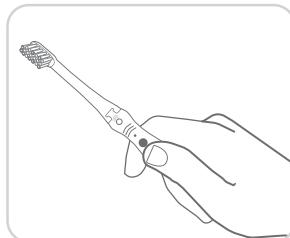

Jak si nejlépe vyčistit zuby?

Pokaždé opakujte to samé. Zuby čistěte nejprve z vnější a po té z vnitřní strany. Začněte spodní čelistí a po té se přesuňte na tu horní.

Na vnitřní straně dásní přiložte štětiny zubního kartáčku proti zubům v mírném úhlu k linii dásní a čistěte jemnými krátkými krouživými pohyby. U každého zuba provedte 5-10 opakování.

Pro vnitřní části používejte stejnou techniku a pohybujte se postupně z jedné stoličky na druhou.


Pokud jde o žvýkací plošky, začněte čistit na jedné straně stoliček a pomalu se pohybujte krátkými pohyby tam a zpět směrem k druhé straně stoliček.

Celý proces by měl trvat přibližně 3 až 6 minut.

Je klinicky prokázáno, že manuální kartáčky IONICKISS odstraňují zubní plak až o 48% efektivněji a to i bez použití zubní pasty.

Není třeba tlačit. Čistěte zuby jemně.

Jak zkontrolovat stav baterie?

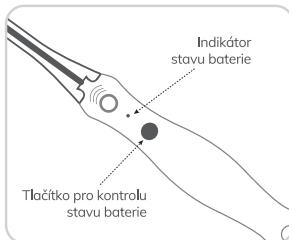


Pokud chcete zkontrolovat stav baterie, zmáčkněte kontrolní tlačítko.

Zelené světlo znamená, že váš zubní kartáček je připraven k použití.

Litiová baterie je zabudovaná do těla kartáčku a vydrží cca jeden rok.


Jak vyměnit náhradní hlavici?

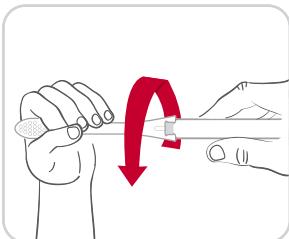

Džte kartáček pevně za rukojet.

Otočte výmennou hlavici o 90 stupňů a zatáhněte.

Jak nasadit výmennou hlavici?

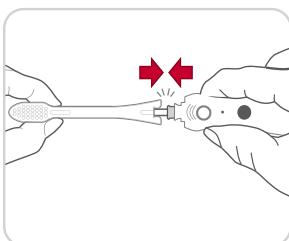

Nasadte výmennou hlavici na kovovou tyčinku a zavakněte ji do kartáčku.

*Existují různé typy výmenných hlavic IONICKISS. Podrobnosti naleznete na ionickiss.cz