

IONPA

INSTRUKCE

Děkujeme, že jste si vybrali značku IONICKISS.

Zavázali jsme se nabízet produkty, které co možná nejefektivněji čistí zuby a pomáhají tak chránit zdraví dutiny ústní. Tento ionizační zubní kartáček účinně redukuje hromadění plaku a odstraňuje skvrny od kávy, čaje a koulení. Kartáček tak hráje důležitou roli také v prevenci zátnutí dásní.


Použití zubního kartáčku IONPA HOME přináší celo nový zážitek při čištění zubů. Prosím, přečtěte si tuto instruktážní brožuru před prvním použitím a mějte ji neustále po ruce.

Důležitá bezpečnostní opatření

1. Výrobek násilně neotvírejte, neopravujte ani nijak neupravujte.
2. S výrobkem nebouhejte ani ho nenechte spadnout na zem. Pokud se výrobek zdá být poškozený, nepoužívejte jej.
3. Před nabíjením zkонтrolujte, že se elektrické napětí v síti shoduje s doporučeným napětím nabíječky.
4. Používejte tento výrobek pouze s originálními hlavicemi IONICKISS a originální nabíječkou.
5. Použití výrobku konzultujte se svým zubařem pokud jste v minulosti podstoupili chirurgický zákon v dutině ústní.
6. Použití zubních kartáčků IONICKISS je bezpečné pro všechny. Nicméně, pokud používáte kardiostimulátor či podobné zařízení, prosíme, konzultujte použití kartáčku se svým lékařem.
7. Tento výrobek je určen pouze pro čištění zubů, dásní a jazyka.
8. Děti a osoby se sníženými fyzickými a smyslovými schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí musí být poučeny, jak bezpečně zacházet se sonickým kartáčkem a musí rozumět případným nebezpečím.
9. Nepoužívejte nabíjecí základnu venku nebo při vysokých teplotách. Neponořujte základnu nebo tělo kartáčku do vody nebo jiné kapaliny. Pokud napájecí zdroj nepoužíváte nebo se jej chystáte čistit, odpojte jej ze sítě. Nečistěte prosím prostředky na péči o vlasy (jako jsou gely nebo oleje), mydlem na ruce nebo kyselým čisticím prostředkem. Mohlo by dojít k poškození povrchu výrobku.
10. Děti by měly výrobek používat pod dohledem, aby byla zajištěna správná manipulace.
11. Neskladujte na slunci a/nebo ve vysokých teplotách.



1 Části zubního kartáčku

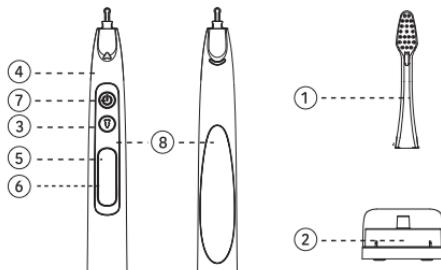

Informace o produktu

Název produktu	Ionizačně - sonický zubní kartáček	Model	DP-111
Výkon (kartáček)	1.2 W	Napětí (kartáček)	DC 3.7 V
Příkon (stojánek)	1.5 W	Napětí (nabíječka)	5 V
Doba potřebná k dobít	cca 4 hodiny	Kapacita baterie	260 mAh
Operativní standard	GB4706.59-2008	Původ	Japonsko
Použití baterie při plném nabité	100 minut	Váha	cca 85g (včetně hlavice)
Velikost rukojeti	Přibližně 2,54 cm x 2,54 cm x 22,86 cm		
Frekvence	Přibližně 22 000 kmitů/min. (režim Clean) Přibližně 26 000 kmitů/min. (režim White+)		

- ① Hlavice kartáčku
② Nabíjecí stanice
③ Tlačítko výběru režimu čištění
④ Rukojet
⑤ Panel zobrazující režim čištění
⑥ Kontrolka LED napájení
⑦ Tlačítko zapnutí / vypnutí
⑧ Kovová dotyková plocha


2 Použití IONPA HOME

- Nasadte výměnnou hlavici pevně na ocelovou tyčinku rukojeti kartáčku.
- Navléčenou rukou uchopte rukojeti v místě kovového pásku. Tím se spustí tok záporních iontů, díky kterému pracuje sonický kartáček IONPA HOME ještě efektivněji.
- Navléčete hlavici a pokud chcete, nenechte malé množství zubní pasty, (obvykle stačí polovina běžné používaného množství zubní pasty).
- Umístejte štětiny kartáčku pod mírným úhlem k linii dásní.
- Vyberte si režim čištění pomocí tlačítka k tomu určenému. Zvolený režim se zobrazí na displeji. Vyberte z následujících režimů:
 - Clean: přibližně 22 000 kmitů za minutu. Režim pro každodenní čištění, pomocí kterého udržujete celou dutinu ústní perfektně čistou.
 - White+: přibližně 26 000 kmitů za minutu. Režim určený pro odstranění povrchových skrvin ze zubů.
 - Gumcare: Kromě čištění zubů poskytuje tento režim také jemnou masáž dásní.
 - HiClean: Tento režim je o něco důraznější, aby se dostal k plku v mezizubních prostorach.
- Jemným pohybem hlavice pomalu přejíždějte přes zuby sem a tam. Střídejte čištění předních, zadních a žívacích ploch Zubů, přičemž každou povrch venujte olešpon 10 sekund. Ujistěte se, že štětiny dosahují mezi zuby a jemně masážují dásní. Na štětiny nevyrývajte příliš velký tlak, většinu práce odvede sonický pohyb hlavice.

Indikátor výměny hlavice

Pokud se rozhodnete indikátor výměny hlavice nevyužít:

Indikátor výměny hlavice je z výroby aktivní. Pokud se rozhodnete indikátor nepoužívat, nejprve se ujistěte, že je zařízení vypnuté a stisknutí multifunkčního tlačítka na více než 2 sekundy indikátor vypněte.

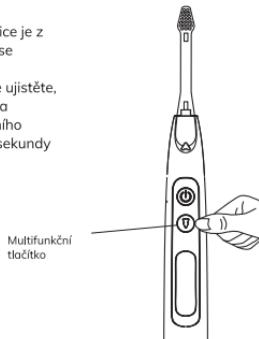


Jak resetovat indikátor výměny hlavice:

(zmizí ikona hlavice kartáčku)

Pokud je indikátor aktivován, po 180 minutách používání se zobrazí ikona hlavice kartáčku. Ikona bude blíkat po dobu 30 sekund i po vypnutí zařízení.

Chcete-li resetovat výrobek, vypněte jej a po dobu 2 sekund držte současně vypínač i multifunkční tlačítko. Indikátor nebude resetovat pouhou výměnu hlavice kartáčku.

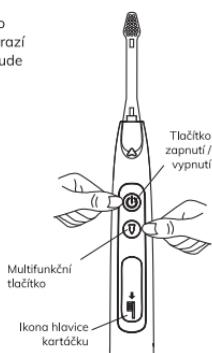

3 Vlastnosti

- Motorek v kartáčku IONPA HOME zajišťuje 26 000 kmitů za minutu s amplitudou (pokrytím plochy) 6 mm k dosažení účinného vycíštění zubů.
- Tělo kartáčku má ergonomický tvar a měkkou povrchovou úpravou pro snadný a pohodlný úchop.
- Inteligentní časovač se každých 30 sekund pozastaví, a to celkem třikrát během doporučených dvou minut, aby uživateli připomněl doporučený čas čištění každého sektoru dutiny ústní.
- Tělo kartáčku lze ponorit do vody až do houbky jednoho metru a to až po dobu 30 minut, aniž by se výrobek poškodil. Pro každodenní čištění tedy výrobek splňuje parametry vododolnosti naprostě dosačné.
- Výrobek obsahuje bezpečnou a odolnou lithiovou baterii. Plně nabité baterie vydrží až 25 dní (použití po dobu 2 minut, dvakrát denně) a po té uživatel upozorní na nízkou úroveň nabíti.
- Nabízí 4 režimy čištění - "Clean", "White+", "Gumcare" a "HiClean" k zajištění různé úrovni čištění zubů a/nebo dásní.

Funkce výrobku byly přednastaveny z výroby a před distribucí zkontrolovány.

4 Výměna hlavice kartáčku



Výměna hlavice:

Otočte hlavici o 90 stupňů tak, jak je ukázáno na obrázku vlevo a poté vysuňte z rukojeti.

Nasazení nové hlavice:

Zasuňte hlavici na kovovou tyčinku až do zavaknutí.



5 Dobíjení výrobku

- Díky indukčnímu nabijení stačí umístit zubní kartáček na dobíjecí základnu připojenou k elektřině.
- LED kontrolka indikuje, že se jednotka nabíje. Po té, co se kartáček plně nabije, tato kontrolka zhasne. Celý proces by měl trvat maximálně čtyři hodiny.
- Tlačítko volby režimu je během nabíjení deaktivováno.
- Pokud umístejte spuštěný výrobek na nabíjecí základnu, vypne se a přejde do režimu nabíjení.

6 Čištění výrobku

1. Rukojet

Sejměte hlavici kartáčku z rukojeti. Měkkým vlhkým hadříkem otřete celou plochu rukojeti a kovovou tyčinku a nechte uschnout na vzduchu.

2. Nabíjecí stojánek

Čistěte pomocí měkkého vlhkého hadříku a nechte uschnout na vzduchu.

Neponořujte do vody.

3. Hlavice kartáčku

Po každém použití hlavici pečlivě opláchněte. Štětiny nestlačujte ani se je nesnažte vytáhnout, aby nedošlo k jejich poškození. Doporučujeme měnit hlavici zubního kartáčku každě 2 měsíce. Nadměrně používané hlavice mohou hromadit bakterie a jejich účinnost čištění se v průběhu času sníží.

Po 30 dnech používání se rozsvítí kontrolka pro výměnu hlavice. Tato kontrolka má pouze informativní charakter a rozsvítí se s časovým předstihem tak, abyste měli dostatek času zajistit si hlavici novou.